

Flüssigsauerstofftank und Mobilgerät

Einschulungsprotokoll

Klinik Penzing

Abteilung für Atemwegs- und
Lungenkrankheiten

von

Klebeetikett

Weitere Personen

Handhabung Flüssigsauerstoffsysteme: Tank und Mobilgerät

- Das Hantieren mit offenem Feuer oder das Rauchen neben dem Sauerstoff ist lebensgefährlich!
- Geräte immer in einem gut belüfteten Bereich betreiben!
- Keine Decken, Tücher oder sonstige Materialien über den Tank legen.

Ihr Flüssigsauerstoffsystem besteht aus zwei Elementen: einem Tank und einem Mobilgerät



Tank: Füllstation für Mobilgerät


Der Tank ist mit Flüssigsauerstoff bei -183°C gefüllt.

Am Tank sind ein Befeuchterbehälter und ein Kondenswasserbehälter montiert



Tank: Geräteerklärung

- Einsetzmulde für Topfill
- Knopf zum Lösen vom Mobilgerät
- Andockkolben für Sidefill Mobilgerät
- Einstellknopf für die Durchflussrate vom Sauerstoff
- Füllkontrollanzeige: Überprüfungs-knopf zur Anzeige der Füllmenge

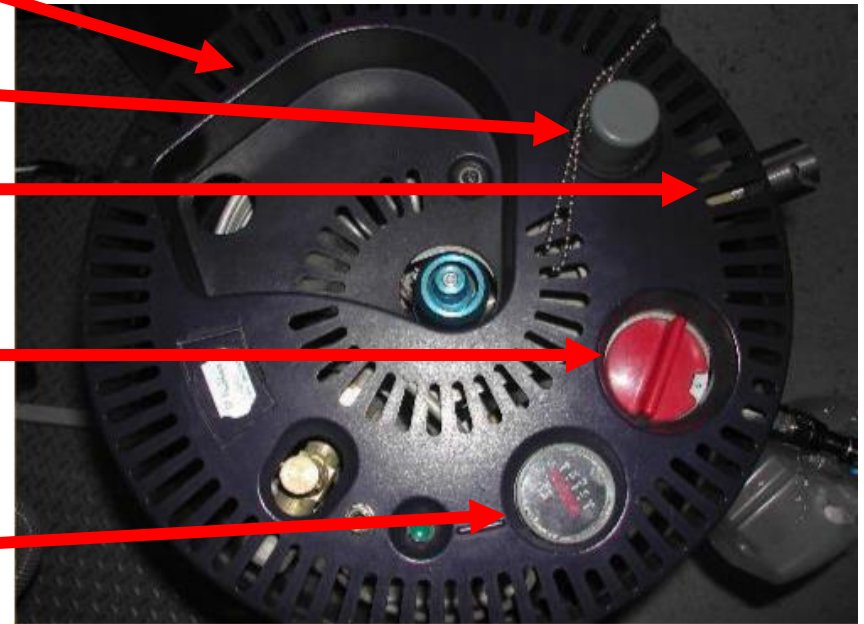

Tank: Befeuchter- und Kondenswasser-Behälter

Befeuchterbehälter: mit medizinisch destilliertem Wasser (Apotheke) befüllen und alle 3 Tage wechseln – sonst Verkeimung.

Kondenswasserbehälter: Bei Ansammlung von Kondenswasser leeren Sie bitte den Behälter aus.




Tank: Sauerstoffabgabe im häuslichen Umfeld

Schließen Sie die Sauerstoffkanüle an den Befeuchterbehälter des Tanks an.



Tank: Einstellung der Durchflussrate

Mit dem roten Drehknopf stellen Sie die Durchflussrate ein (nach ärztlicher Anordnung).

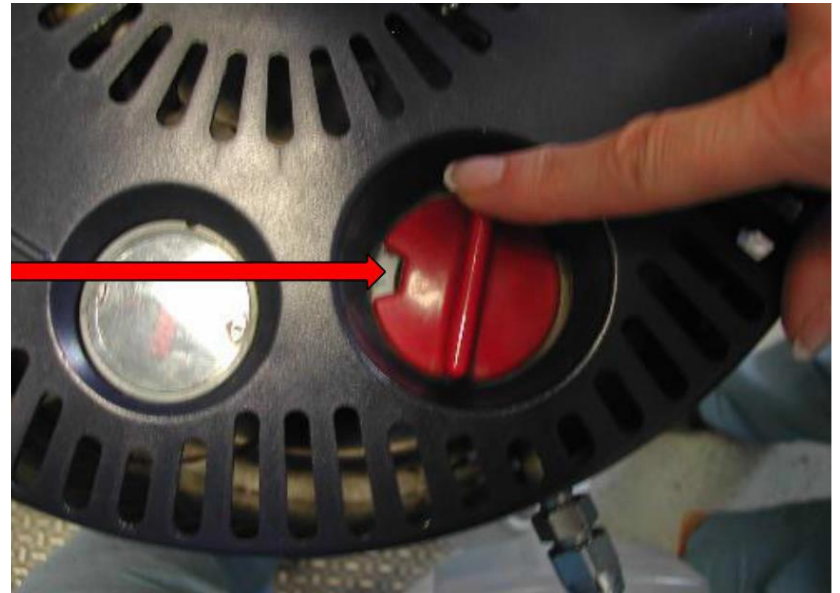

Mobilgerät: Helios 300/850

Mobilgerät

Helios 300 oder Helios Marathon 850

Gerät mit Gerätetasche oder geeignetem Transportbehälter (z. B. Rucksack) transportieren.



Helios 300/850: Gerätebeschreibung

Vorderansicht


- Haltegriff
- Durchflussregler
- Anschlüsse für die Nasenkanüle
(Doppellumig)
- Unterseite: Anschluss zur Befüllung



Helios 300/850: Gerätebeschreibung

Rückansicht

- Haltegriff
- Füllstandkontrolle
- Entlüftungsventil

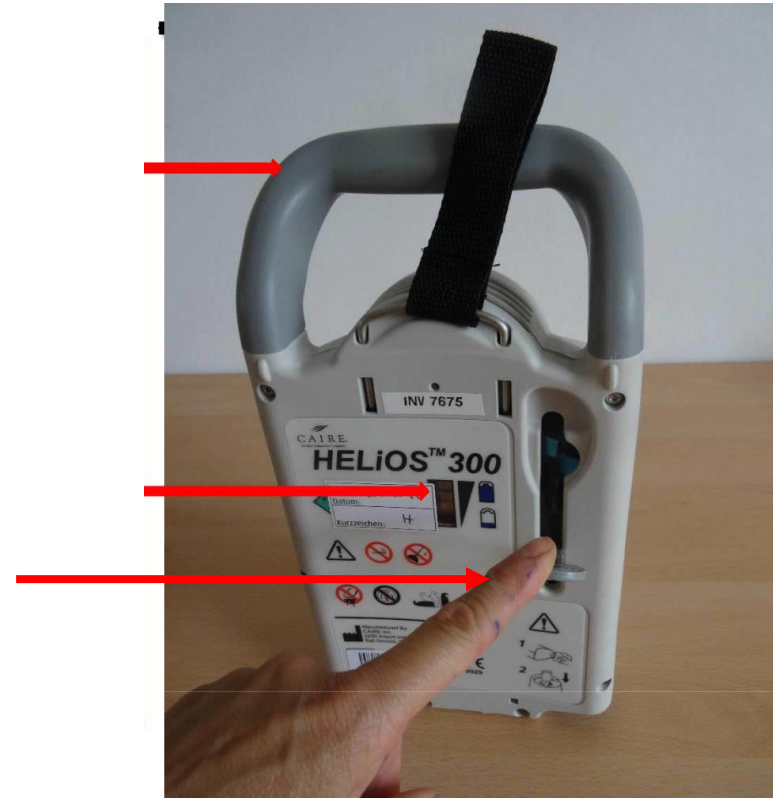

Helios 300/850: Anschlüsse für Nasenbrille

Anschlüsse für die Nasenkanüle
(doppellumig)



Mobilgerät: Helios 300/850

Helios 300

Nutzungsdauer bei Stufe 2: 9 Std., Gewicht gefüllt 1,63 Kg, Sauerstoffzufuhr: Stufen 1 - 4

Helios Marathon 850

Nutzungsdauer bei Stufe 2: 22 Std., Gewicht gefüllt 2,54 Kg, Sauerstoffzufuhr: Stufe 1 - 6



Durchflussregler: kontinuierlich / Bedarf

Kontinuierliche Einstellung


Der Durchflussregler wird gegen den Uhrzeigersinn gedreht:

C1 – C6 (850), C1 – C4 (300)

Bedarfseinstellung (D)

Der Durchflussregler wird im Uhrzeigersinn gedreht. In dem Modus erfolgt die Sauerstoffzufuhr nur beim Einatmen:

D1–D4

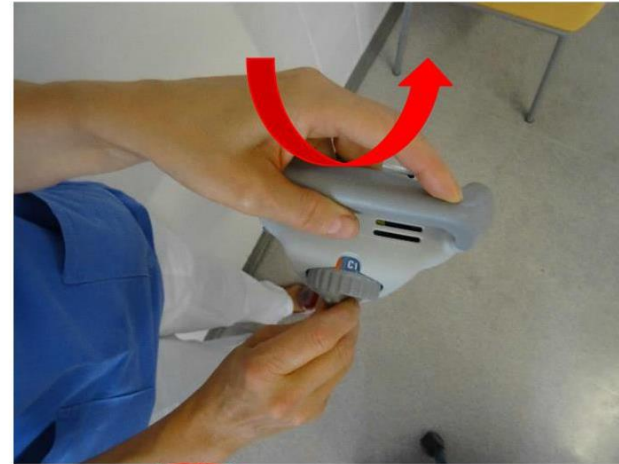

Mobilgerät: Überprüfung des Füllstandes

Füllmenge überprüfen

Die Schlaufe nehmen und das Mobilgerät frei hängen lassen.

Wenn keine grünen Balken zu sehen sind, ist das Gerät leer und muss gefüllt werden.



Mobilgerät Oberbefüllung: Füllvorgang

Immer vor Befüllung den Kolben beim Mobilgerät auf Feuchtigkeit überprüfen, mit einem fusselreien Tuch trocken wischen (Gefahr der Vereisung).

In die Mulde des Tanks einsetzen, der Kolben muss genau andocken.

Gerät nach unten drücken, den Druck beibehalten.





Mobilgerät Oberbefüllung: Füllvorgang

Entlüftungsventil öffnen, um den Füllvorgang zu beginnen (es muss ein lautes Zischgeräusch hörbar sein). Halten Sie den Hebel während des gesamten Füllvorgangs gedrückt.

Füllende

Wenn Dampfwolken unregelmäßig entweichen, Hebel loslassen.

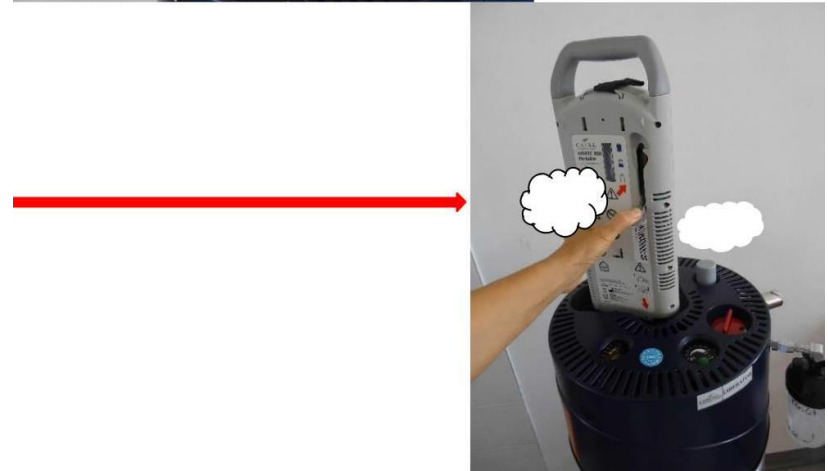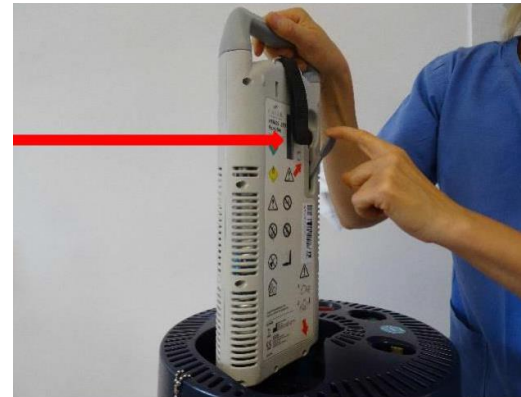

Mobilgerät Oberbefüllung: Ende des Füllvorgangs

Ende des Füllvorganges

Das Mobilgerät durch Festhalten am Tragegriff und Drücken des Entriegelungsknopfes vom Tank lösen.

Das Mobilgerät beim Lösen vom Tank immer mit einer Hand halten!



Mobilgerät: allgemeine Hinweise

Wenn nach dem Füllvorgang das Mobilgerät am Tank vereist ist, **warten Sie 30 Minuten**, bevor Sie die Geräte trennen.

Trennen Sie die Geräte nie gewaltsam!

Leichte Reifbildung ist normal.

Wenn jedoch das Zischen des Mobilgeräts verbunden mit übermäßiger Reifbildung anhält, dann stellen Sie die Verwendung ein und setzen sich mit ihrem Lieferanten in Verbindung



Füllstandkontrolle

Gurt nehmen und das Gerät zur Füllstandkontrolle frei hängen lassen.

Wenn die Federwaage einen **grünen Balken** anzeigt, ist das Gerät vollständig befüllt.



Sauerstofftankstellen / Kostenübernahme

Sauerstofftankstellen

Wenn das Mobilgerät unterwegs vorzeitig leer wird, können Sie bei den Adressen gratis ihr Gerät auftanken lassen.

Kostenübernahme

Es entstehen keine Kosten!

Für eine Weiterverordnung bei ihrem Lungenfacharzt werden Sie von ihrer Lieferfirma zeitnah verständigt.

Für alle SauerstoffpatientInnen kostenlos.
Mit den Geräten aller Lieferanten kompatibel.
Ein kostenloser Service der Fa. Vivisol.

Die aktuelle Liste finden Sie unter:
www.vivisol.at



Sauerstofftankstelle

für mehr Lebensqualität

Wien	1010 Wien 1060 Wien 1070 Wien 1070 Wien 1100 Wien 1100 Wien 1110 Wien 1140 Wien 1150 Wien 1160 Wien 1170 Wien 1200 Wien 1210 Wien 1220 Wien 1230 Wien	Urania-Apotheke Apotheke „Am Naschmarkt“ Apotheke „Zum weißen Hirschen“ Wallisch-Apotheke Apotheke am Reumannplatz Kur-Apotheke Oberlaa Ludwigs-Apotheke Europa-Apotheke Lindwurm Apotheke Apotheke am Schuhmeierplatz Linden Apotheke Hernauer Allenheiligen-Apotheke Apotheke 21 Apotheke Regenwald Apotheke Rodaun	Stubenberg 2 Linke Wienzeile 20 Westbahnstraße 32 Lechenfelder Straße 41 Reumannplatz 16 Kurbadstraße 14 Simmeringer Hauptstr. 128 Hütteldorfer Straße 186 Gablengasse 31 Schuhmeierplatz 14 Hauptstraße 155 Allenheiligenplatz 4 Kürschnergasse 1A Wagramer Straße 81/134 Ketzergerasse 368	Tel. 01 512 44 63 Tel. 01 586 51 59 Tel. 01 523 76 68 Tel. 01 523 81 79 Tel. 01 604 13 98 Tel. 01 688 13 23 Tel. 01 767 51 34 Tel. 01 912 37 90 Tel. 01 982 24 21 Tel. 01 486 33 74 Tel. 01 486 24 04 Tel. 01 330 43 23 Tel. 01 890 32 28 Tel. 01 202 28 13 Tel. 01 888 41 70
NÖ	2320 Schwechat 2700 Wr. Neustadt 2700 Wr. Neustadt 3500 Krems	Landschafts-Apotheke Alte Krone-Apotheke Bahnhof-Apotheke Univ. Klinikum Krems	Wiener Straße 5 Hauptplatz 13 Zehnergasse 4 Mitterweg 10	Tel. 01 707 64 96 Tel. 02622 233 00 Tel. 02622 232 93 Tel. 02732 900 40
Bgld.	7082 Donnerskirchen 7350 Oberpullendorf	Schutzengel-Apotheke Apotheke „Zum Mohren“	Neusiedler Straße 16 Schloßplatz 1	Tel. 02683 854 2 Tel. 02612 423 39
OO	4020 Linz 4020 Linz 4061 Pasching 4600 Wels 4840 Vöcklabruck	Krankenhaus Elisabethinen City Apotheke Christophorus-Apotheke Plus-City Schutzengel-Apotheke Apotheke Schöndorf	Fadingerstraße 1 Bahnhofplatz 3-6 Plus-Kauf-Straße 7 Eferdinger Straße 20 Robert-Kurz-Straße 11	Tel. 0732 767 60 Tel. 0732 600 150 Tel. 07229 610 85 Tel. 07242 470 98 Tel. 07672 225 62
Sbg.	5020 Salzburg 5760 Saalfelden	Borromäus Apotheke Pinzgau-Apotheke	Gaisbergstraße 20 Leoganger Straße 39	Tel. 0662 643 655 Tel. 06582 741 03
Stmk.	8010 Graz 8045 Graz-Andritz 8054 Seiersberg 8160 Weiz	Adler Apotheke Apotheke Andritz Lilien-Apotheke K Paracelsus Apotheke	Hauptplatz 4 Wenzelsstraße 3 artner Straße 537 Birkfelder Straße 1	Tel. 0316 830 342 Tel. 0316 672 808 Tel. 0316 253 005 Tel. 0317 236 50
Ktn.	9020 Klagenfurt 9500 Villach	Apotheke vom Lindwurm Kreis-Apotheke „Zum goldenen Löwen“	Neuer Platz 9 Hauptplatz 9	Tel. 0463 512 575 Tel. 04242 241 18
Tirol	6020 Innsbruck 6460 Imst 6500 Landeck 9900 Lienz	St. Anna Apotheke Stadt Apotheke Stadt Apotheke „Zur Mariahilf“ Bezirkskrankenhaus	Maria-Theresien-Str. 4 Dr.-Pfeiffenberger-Straße 22 Malser Straße 18 Emanuel v. Hübler-Straße 5	Tel. 0512 585 847 Tel. 05412 662 10 Tel. 05442 623 34 Tel. 04852 606
Vbg.	6850 Dornbirn 6700 Bludenz 6900 Bregenz	Apotheke im Messepark Apotheke Bludenz Stadt Stadt Apotheke	Messestraße 2 Werdenberger Str. 24-26 Kirchstraße 7	Tel. 05572 558 80 Tel. 05552 620 47 Tel. 05574 421 02

Urlaubsversorgung

Mobil bedeutet, Reisen zu können.

Bitte Benachrichtigen Sie ihre Lieferfirma vor Reisebeginn (genaue Adresse, An- und Abreisetag):

- 3 Wochen vorher bei einer Reise innerhalb Österreichs
- 4-6 Wochen vorher bei einer Reise ins Ausland



Allgemeine Hinweise

Sie bekommen zu den Geräten von ihrer Lieferfirma eine Bedienungsanleitung.

Lesen Sie diese bitte aufmerksam durch.

Bei möglichen Notfällen oder Problemen mit ihrem Sauerstofftank oder Mobilgerät, wenden Sie sich umgehend an ihre Lieferfirma!

Gutes Gelingen!

Stand- und tragbarer Konzentrator

Datum	FN	Kommentar	Note	HZ

FN= Foliennummer, Notensystem: 1= sehr gut, 2= gut, 3= befriedigend, 4= genügend, 5= nicht genügend